

### Order information:

Catalog No.	Contents						
1903	R1	1 x	100 ml	R2	1 x	100 ml	
	R4	1 x	5 ml				
H3501	Hit I (ILab*)	R1	12 x	50 ml	R2	6 x	43 ml
H3503	Hit 917 (AU*)	R1	6 x	60 ml	R2	6 x	28 ml
AU3503	AU	R1	6 x	60 ml	R2	6 x	28 ml

(\* ) Kit contains only reagent barcode for Hitachi system.

### System information:

Hitachi 911: ACN 043  
Hitachi 917: ACN 749

For application on the Hitachi 912, please use an open system or contact the Analyticon Customer Support.

### Intended use:

In vitro test for the quantitative determination of calcium in human serum, plasma and urine.

### Summary:

The calcium content of an adult is somewhat over 1kg (25000mmol), i.e. about 2% of the body weight. Of this, 99% is present as calcium hydroxyl-apatite in bones and less than 1% is present in the extra-osseous ICS (intra-cellular space) or ECS (extracellular space). The calcium level in the ECS (approx. 100mmol) is in dynamic equilibrium with the rapidly exchangeable fraction of bone calcium. Calcium ions affect the contractility of the heart and the skeletal musculature and are essential for the function of the nervous system. In addition, calcium ions play an important role in blood clotting and bone mineralization. In plasma, calcium is bound to a considerable extent to proteins (approx. 40%), 10% is in the form of inorganic complexes and 50% is present as free (ionized) calcium. The body's calcium balance is regulated by the parathyroid hormone (PTH), calcitriol (CT) and calcitonin.


The test is used for the diagnosis and monitoring of hypocalcemia (calcium deficiency) and hypercalcemia (excess calcium) in serum. The characteristic symptom of hypocalcemia is latent or manifest tetany and osteomalacia. Hypocalcemia is due to the absence or impaired function of the parathyroid or impaired vitamin D-synthesis. Hypercalcemia is brought about by increased mobilization of calcium from the skeletal system (osteoporosis) or increased intestinal absorption. The majority of cases are due to primary hyperparathyroidism (pHPT) or bone metastasis of carcinoma of the breast, prostate or thyroid and bronchial carcinoma. The main significance of determining urinary calcium lies in the differentiation between hypercalciuria and hypocalciuria and the differential diagnosis of nephrolithiasis.

Complexometric methods are used in addition to atomic absorption spectrometry (AAS) for determining calcium. The following calcium determination is based on the reaction of calcium with o-cresolphthalein complexone in alkaline solution. Magnesium is masked with 8-hydroxy-quinoline.

### Test principle:

Colorimetric assay with endpoint determination and sample blank

- Sample and addition of R1 (buffer)
- Addition of R2 (chromogen) and start of reaction:

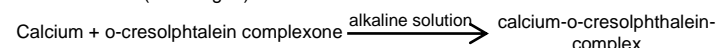

The colour intensity of the purple complex formed is directly proportional to the calcium concentration and is measured photometrically.

### Reagent Concentration:

<b>R1:</b>	
AMP buffer, pH 10.7	350 mmol/l
<b>R2:</b>	
o-Cresolphthalein complexone	0.16 mmol/l
8-hydroxyquinoline	6.9 mmol/l
Hydrochloric acid detergent	0.06 mmol/l
<b>R4: (#1903)</b>	
Calcium	10 mg/dl (2.5 mmol/l)

### Preparation and stability:

#### Reagent-Start:

R1: ready for use  
R2: ready for use  
Unopened kit components up to the expiration at + 2 to + 25°C.  
Onboard stability: R1 35 days  
R2 35 days

#### Serum-Start:

Mix equal parts of R1 + R2 according to requirements.  
Stability of working solution:  
3 days at +15°C to +25°C  
7 days at +2°C to +8°C

### Specimen:

Collect serum using standard sampling tubes.  
Heparin plasma. Plasma must be assayed fresh.  
Stability: 7 days at +20°C to + 25°C  
3 weeks at + 4°C to + 8°C  
8 months at - 20°C

Do not use oxalate-, EDTA-, or citrate-plasma.

#### Urine

24-hour urine: Place 10 ml hydrochloric acid (6mol/l) in a collection bottle, or acidify (pH<2.0) after urine collection, in order to dissolve calcium salts. Before determination dilute urine 1:1 with distilled water, multiply the result by 2.

Stability : 2 days at +20°C to + 25°C  
4 days at + 4°C to + 8°C  
3 weeks at -20°C

Centrifuge samples containing precipitate before performing the assay.

### Notes:

For in vitro diagnostic use.

The material safety data sheet contains further safety-related information. It is available for download from our homepage <http://www.analyticon-diagnostics.com>. Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.

### Limitation interference:

Criterion: Recovery within ± 10% of initial value.

#### Serum/plasma

Icterus: No significant interference up to an index I of 100 (approximate bilirubin concentration: 100 mg/dl).

Hemolysis: No significant interference up to an index H of 200 (approximate hemoglobin concentration: 200 mg/dl).

Lipemia (Intralipid): No significant interference up to an index L of 100 (approximate triglycerides concentration: 200 mg/dl). There is poor correlation between turbidity and triglycerides concentration.

The effect of drugs or their metabolic products on the test is not known in all cases. In case of doubt it is recommended to repeat the test after the medication has been discontinued. However, the medication may only be discontinued according to instructions of the attending physician.

### Testing procedure:

Applications for automated systems are available on request.

#### Materials provided

- Working solutions as described above

#### Additional materials required

- Calibrators and controls as indicated below
- 0.9% NaCl
- Chimneys

<b>Manual Testing Procedure:</b>			
Wavelength:	Hg 578 nm (550-590nm)		
Reaction temperature:	+25°C		
Cuvette:	1 cm		
Zero adjustment:	One reagent blank for each series		
<b>Serum start:</b>			
	Blank	Calibrator	Sample
Working solution	2000 µl	2000 µl	2000 µl
Aqua dest.	50 µl	---	---
Calibrator	---	50 µl	---
Sample	---	---	50 µl
Mix and incubate 5 minutes. Then read the absorbance of sample and calibrator against reagent blank. Signal is stable for 5-60 minutes.			
<b>Reagent start:</b>			
	Blank	Calibrator	Sample
R1	1000 µl	1000 µl	1000 µl
Aqua dest.	50 µl	---	---
Calibrator	---	50 µl	---
Sample	---	---	50 µl
R2	1000 µl	1000 µl	1000 µl
Mix and incubate 5 minutes. Then read the absorbance of sample and calibrator against reagent blank. Signal is stable for 5-60 minutes.			
<b>Calculation:</b>			
ΔE Sample	x Conc. Calibrator = Calcium in mg/dl		
ΔE Calibrator			

### Measuring range:

#### Serum/plasma

Measuring range: 0.05-4.0 mmol/l (0.2-16 mg/dl)  
Determine samples having higher concentrations via rerun function. On instruments without rerun function, manually dilute samples with 0.9% NaCl or distilled/deionised water (e.g. 1+1). Multiply the result by the appropriate dilution factor (e.g. 2).

#### Urine

0.05-4.00 mmol/l (0.2-16 mg/dl)  
Roche/Hitachi 704/717  
Measuring range: 0.05-4.00 mmol/l (0.2-16 mg/dl)  
Roche/Hitachi 902/904/911/912  
Measuring range: 0.12-8.00 mmol/l (0.48-32 mg/dl)  
Roche/Hitachi 917

Measuring range: 0.12-9.25 mmol (0.48-37 mg/dl)  
Determine samples having higher concentrations via rerun function. On instruments without rerun function, manually dilute samples with 0.9% NaCl or distilled/deionised water (e.g. 1+1). Multiply the result by the appropriate dilution factor (e.g. 2).

### Reference value:

#### Serum/plasma

2.15-2.55 mmol/l (8.60-10.2 mg/dl)

#### 24-hour urine

2.5-8.0 mmol/24 h (100-320 mg/24 h), corresponding to 1.7-5.3 mmol/l\* (6.7-21 .3 mg/dl\*)

\*Assuming a urine volume of 1.5 l/24 h

### Reference range acc. to Tietz

#### Serum/plasma

Children (0-10 days): 7.6-10.4 mg/dl (1.90-2.60 mmol/l)  
Children (10 days-2 years): 9.0-11.0 mg/dl (2.25-2.75 mmol/l)  
Children (2-12 years): 8.8-10.8 mg/dl (2.20-2.70 mmol/l)  
Adults (12-60 years): 8.4-10.2 mg/dl (2.10-2.55 mmol/l)  
Adults (60-90 years): 8.8-10.2 mg/dl (2.20-2.55 mmol/l)  
Adults (> 90 years): 8.2- 9.6 mg/dl (2.05-2.40 mmol/l)

Urine: 100-300 mg/24 h (with normal food intake)

Each laboratory should investigate the transferability of the expected values to its own patient population and if necessary determine its own reference range. For diagnostic purposes the calcium results should always be assayed in conjunction with the patient's medical history, clinical examinations and other findings.

### Analytical sensitivity (lower detection limit):

Detection limit: 0.05 mmol/l (0.2 mg/dl)

The detection limit represents the lowest measurable calcium concentration that can be distinguished from zero.

### Imprecision:

#### Serum

Reproducibility was determined using controls. The following results were obtained.

Sample	Between day		
	Mean mg/dl	SD mg/dl	CV %
Control serum 1	8.17	0.13	1.59
Control serum 2	14.88	0.32	2.15
Control serum 3	29.77	0.58	1.95

Sample	Within run		
	Mean mmol/l	SD mmol/l	CV %
Control serum 1	2.21	0.033	1.49
Control serum 2	2.66	0.035	1.32
Control serum 3	3.89	0.031	0.80

### Method comparison:

A comparison of the Analyticon Fluitest® CA CPC (y) with a commercial obtainable assay (x) gave the following result:

$$y = 1.113 x - 0.278; \quad r = 0.99$$

### Quality control:

#### Human Control Serum:

Contronorm® Plus 5 x 5 ml #1205

20 x 5 ml #1220

Controptath® Plus 5 x 5 ml #1305

20 x 5 ml #1320

#### Urine Control:

Urine Control Set 8 x 5 ml #1507

The control intervals and limits must be adapted to the individual laboratory and country-specific requirements. Values obtained should fall within established limits. Each laboratory should establish corrective measures to be taken if values fall outside the limits.

### Calibration:

Standardization: The calcium method was standardized by atomic absorption spectrometry.

S1: 0.9% NaCl

S2: Bio-Cal® 20 x 3 ml #1420

Bio-Cal® E 10 x 3 ml #1430

R4: calibrator provided in kit.

#### Roche/Hitachi:

Absorption of atmospheric CO<sub>2</sub> by the opened reagent bottle R1 leads to impaired calibration stability. This kit therefore requires the use of colour-coded chimneys which reduce the uptake of CO<sub>2</sub> by the reagents. The chimneys should be placed directly into the appropriate reagent(s): white for R1. The chimneys can be reused for reagent bottles within the same kit.

Chimneys are used on all systems except the Roche/Hitachi 736/737 und 747. Calibration stability on these instruments can be achieved by the use of suitable caps for bottle R1

### Calibration frequency:

Two-point calibration is recommended:

- Every 7 days if the reagent bottles are onboard the analyser for more than 7 days
- After reagent bottle change if the previous bottles were onboard the analyser more than 7 days.
- After reagent lot change
- As required following quality control procedures

Calibration verification: n/a

### Disposal:

Please note the legal regulations.

### Literature:

- Farrel E.C. Calcium. In: Pesce A.J., Kaplan L.A. (ed.). Methods in Clinical Chemistry. St. Louis/Washington/Toronto: CV Mosby, 1987:865-869.
- Gindler E.M., King J.D. Am J Clin Pathol 1972;58:376.
- Glick M.R., Ryder K.W., Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32:470-474.
- Gosling P. Analytical reviews in clinical biochemistry: Calcium measurement. Ann Clin Biochem 1986;23:146.
- Guder W.G. Narayanan S., Wissner H., Zawta B. List of Analytes Preanalytical Variables. Broschüre in: Samples: From the Patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag,1996.
- Külpmann W.R., Stummvoll H.K., Lehmann P. (ed.). Elektrolyte, Klinik und Labor, 2. Auflage. Wien/New York: Springer-Verlag, 1997.
- Mathias D. Labordiagnostik bei Störungen des Knochenstoffwechsels. Clin Lab 1996;42:1069-1073.
- Schmidt-Gayk H., Blind E., Roth H.J. (ed.). Calcium Regulating Hormones and Markers of Bone Metabolism: Measurement and Interpretation, 2. Auflage. Heidelberg: Clin Lab Publications, 1997.
- Tietz N.W., (ed.). Clinical Guide to Laboratory Tests, 3. Auflage. Philadelphia, Pa: WB Saunders Company, 1995:102.
- Tietz N.W., (ed.). Fundamentals of Clinical Chemistry, 3. Auflage. Philadelphia, Pa: WB Saunders Company, 1987:718-719.

### Bestellinformation:

Katalog-Nr.	Inhalt		
1903	R1 1 x 100 ml	R2 1 x 100 ml	
	R4 1 x 5 ml		
H3501 Hit I (ILab*)	R1 12 x 50 ml	R2 6 x 43 ml	
H3503 Hit 917 (AU*)	R1 6 x 60 ml	R2 6 x 28 ml	
AU3503 AU	R1 6 x 60 ml	R2 6 x 28 ml	

(\* ) Kit enthält nur Reagenzien-Barcodes für Hitachi Systeme.

### Systeminformation:

Hitachi 911: ACN 043  
Hitachi 917: ACN 749

Für die Benutzung am Hitachi 912 verwenden Sie bitte ein offenes System oder wenden Sie sich an den Analyticon Kundensupport.

### Anwendungszweck:

In vitro Test zur quantitativen Bestimmung von Calcium in Humanserum, -plasma und Urin.

### Zusammenfassung:

Der Calciumbestand eines Erwachsenen beträgt etwas mehr als 1 kg (25000mmol), also etwa 2% des Körpergewichts. Von dieser Menge befinden sich 99% als Calciumhydroxylapatit im Knochen und nur weniger als 1% findet sich im extrazellulären IZR (Intrazellulärraum) bzw. im EZR (Extrazellulärraum). Der Calciumbestand im ECR, der etwa 100mmol ausmacht, steht im dynamischen Gleichgewicht mit dem rasch austauschbaren Anteil des Knochencalciums. Calciumionen wirken auf den Kontraktionsablauf des Herzens und des Skelettmuskels und sind für die Funktion des Nervensystems unentbehrlich. Außerdem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung und Knochenmineralisation. Das Calcium ist im Plasma zu einem erheblichen Anteil an Eiweiß gebunden (ca. 40%), 10% liegen in Form anorganischer Komplexe vor und 50% sind frei (ionisiertes Calcium). Der Calciumhaushalt wird durch Parathormon (PTH), Calcitriol (CT) und Calcitonin reguliert.


Der Test dient zur Diagnose und Verlaufskontrolle von Hypocalcämie (Calciummangel) und Hypercalcämie (Calciumüberschuß) im Serum. Das charakteristische Symptom der Hypocalcämie ist die latente oder manifeste Tetanie und die Osteomalazie. Hypocalcämien beruhen auf Fehlen bzw. Unterfunktion der Nebenschilddrüsen oder auf mangelnder Vitamin-D-Bildung. Hypercalcämien beruhen auf einer verstärkten Mobilisation von Calcium aus dem Skelettsystem (Osteoporose) bzw. einer vermehrten intestinalen Resorption. Der überwiegende Anteil der Fälle geht auf primären Hyperparathyreoidismus (pHPT) bzw. Knochenmetastasen der Karzinome von Mamma, Prostata oder Schilddrüse sowie des Bronchialkarzinoms zurück.

Die Hauptbedeutung der Calciumbestimmung im Urin liegt in der Abklärung einer Hypercalcurie von einer Hypocalcurie sowie in der Abklärung einer Nephrolithiasis. Neben der Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) werden komplexometrische Methoden eingesetzt. Die folgende Calciumbestimmung beruht auf der Reaktion des Calciums mit o-Kresolphthalein-Komplexon in alkalischer Lösung. Magnesium wird mit 8-Hydroxychinolin maskiert.

### Testprinzip:

Farb-Test mit Endpunkt-Bestimmung und Probenleerwert

- Probe und Zugabe von R1 (Puffer)
- Zugabe von R2 (Chromogen) und Start der Reaktion:

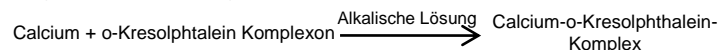

Die Farbintensität des gebildeten violetten Komplexes ist direkt proportional der Calciumkonzentration und wird photometrisch gemessen.

### Konzentration der gebrauchsfertigen Lösung:

<b>R1:</b>	
AMP Puffer, pH 10.7	350 mmol/l
<b>R2:</b>	
o-Kresolphthalein Komplexon	0,16 mmol/l
8-Hydroxyquinolin	6,9 mmol/l
Salzsäure	0,06 mmol/l
Detergenz	
<b>R4: (#1903)</b>	
Calcium	10 mg/dl (2,5 mmol/l)

### Herstellung und Haltbarkeit:

#### Reagenz-Start:

R1: Inhalt ist gebrauchsfertig  
R2: Inhalt ist gebrauchsfertig  
Ungeöffnet bei +2°C bis +25°C bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar.  
Onboard Stabilität: R1: 35 Tage  
R2: 35 Tage

#### Serum-Start:

R1 + R2 werden zu gleichen Teilen je nach Bedarf gemischt.  
Stabilität des Arbeitsreagenz:  
3 Tage bei +15°C bis +25°C  
7 Tage bei +2°C bis +8°C

### Untersuchungsgut:

Serum, Heparinplasma. Das Plasma sollte frisch analysiert werden.

Haltbarkeit: 7 Tage bei +20°C bis +25°C  
3 Wochen bei +4°C bis +8°C  
8 Monate bei -20°C

Oxalat-, EDTA-, oder Citrat-Plasma nicht verwenden.

#### Urin

24 Stunden Urin: in einer Sammelflasche 10 ml Salzsäure (6mol/l) geben oder nach dem Sammeln den Urin ansäuern (pH <2,0), um Calciumsalze zu lösen.

Haltbarkeit: 2 Tage bei +20°C bis +25°C  
4 Tage bei +4°C bis +8°C  
3 Wochen bei -20°C

Proben, die Präzipitate enthalten, müssen vor dem Test zentrifugiert werden.

### Hinweis:

In vitro Diagnostikum.

Weitere sicherheitsrelevante Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt enthalten. Dieses steht auf unserer Homepage <http://www.analyticon-diagnostics.com> zum Download bereit.

Die beim Umgang mit Laborreagenzien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.

### Einschränkungen des Verfahrens - Interferenzen:

Als Bewertung gilt: Wiederfindung ± 10% vom Ausgangswert.

#### Serum/Plasma

Ikterus: Keine wesentliche Beeinflussung bis zum Index I von 100 (ca. 100 mg/dl Bilirubin).

Hämolyse: Keine wesentliche Beeinflussung bis zum Index H von 200 (ca. 200 mg/dl Hämoglobin).

Lipämie (Intralipid): Keine wesentliche Beeinflussung bis zum Index L von 100 (ca. 200 mg/dl Triglyceride). Es besteht keine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen Trübung und Triglyceridkonzentration.

Die Auswirkung von Medikamenten oder deren Metaboliten auf den Test ist nicht in allen Fällen bekannt. Im Zweifelsfall wird deshalb empfohlen, den Test nach Absetzen der Medikation zu wiederholen. Ein Absetzen der Medikation darf allerdings nur nach Anweisung des behandelnden Arztes erfolgen.

### Testverfahren:

Applikationen für automatisierte Systeme sind auf Anfrage erhältlich.

#### Gelieferte Materialien

- Gebrauchsfertige Lösungen wie vorher angegeben.

#### Zusätzlich benötigte Materialien

- Kalibrations- und Kontrollmaterial wie nachfolgend beschrieben.
- Natriumchlorid-Lösung (0,9%)
- Chimneys

<b>Manuelle Testdurchführung:</b>			
Wellenlänge:	Hg 578 nm (550-590nm)		
Reaktionstemperatur:	+25°C		
Schichtdicke:	1 cm		
Messung:	Pro	Messreihe	ein
	Reagenzienleerwert		
<b>Serum-Start:</b>			
	Leerwert	Kalib./Stand.	Probe
Arbeitsreagenz	2000 µl	2000 µl	2000 µl
Aqua dest.	50 µl	---	---
Standard / Kalibr.	---	50 µl	---
Probe	---	---	50 µl
Mischen und 5 Minuten inkubieren. Die Extinktion des Standards und der Probe gegen den Reagenzienleerwert messen. Signalstabilität 5-60 Minuten.			
<b>Reagenzstart:</b>			
	Leerwert	Kalib./Stand.	Probe
R1	1000 µl	1000 µl	1000 µl
Aqua dest.	50 µl	---	---
Standard / Kalibr.	---	50 µl	---
Probe	---	---	50 µl
R2	1000 µl	1000 µl	1000 µl
Mischen und 5 Minuten inkubieren. Die Extinktion des Standards und der Probe gegen den Reagenzienleerwert messen. Signalstabilität 5-60 Minuten.			
<b>Berechnung:</b>			
ΔE Probe	x Konz. Standard = Calcium in mg/dl		
ΔE Standard			

### Messbereich:

#### Serum/Plasma

0,05-4,00 mmol/l bzw. 0,2-16 mg/dl

Proben mit höheren Konzentrationen werden über eine Rerun-Funktion bestimmt. Bei Geräten ohne Rerun-Funktion werden diese Proben manuell mit NaCl-Lösung (0,9%) oder dest. bzw. entionisiertem Wasser verdünnt (z.B. 1+1). Ergebnis mit dem entsprechenden Verdünnungsfaktor multiplizieren (z.B. Faktor 2).

### Urin

0,05-4,00 mmol/l bzw. 0,2-16 mg/dl  
 Roche/Hitachi 704/717  
 Messbereich: 0,05-4,00 mmol/l bzw. 0,2-16 mg/dl  
 Roche/Hitachi 902/904/911/912  
 Messbereich: 0,12-8,00 mmol/l bzw. 0,48-32 mg/dl  
 Roche/Hitachi 917  
 Messbereich: 0,12-9,25 mmol bzw. 0,48-37 mg/dl

Proben mit höheren Konzentrationen werden über eine Rerun-Funktion bestimmt. Bei Geräten ohne Rerun-Funktion werden diese Proben manuell mit NaCl-Lösung (0,9%) oder dest. bzw. entionisiertem Wasser verdünnt (z.B. 1+1). Ergebnis mit dem entsprechenden Verdünnungsfaktor multiplizieren (z.B. Faktor 2)

### Referenzbereich:

#### Serum/Plasma

2,15-2,55 mmol/l bzw. 8,60-10,2 mg/dl

#### 24-Stunden-Urin

2,5-8,0 mmol/24 h bzw. 100-320 mg/24 h entsprechend 1,7-5,3 mmol/l\* bzw. 6,7-21,3 mg/dl\*

\*berechnet aus einem Urinvolumen von 1,5 l/24 h

### Referenzbereich nach Tietz

#### Serum/Plasma

Kinder (0-10 Tage): 7,6-10,4 mg/dl bzw. 1,90-2,60 mmol/l  
 Kinder (10 Tage-2 Jahre): 9,0-11,0 mg/dl bzw. 2,25-2,75 mmol/l  
 Kinder (2-12 Jahre): 8,8-10,8 mg/dl bzw. 2,20-2,70 mmol/l  
 Erwachsene (12-60 Jahre): 8,4-10,2 mg/dl bzw. 2,10-2,55 mmol/l  
 Erwachsene (60-90 Jahre): 8,8-10,2 mg/dl bzw. 2,20-2,55 mmol/l  
 Erwachsene (> 90 Jahre): 8,2- 9,6 mg/dl bzw. 2,05-2,40 mmol/l  
**Urin:** 100-300 mg/24 h (bei normaler Nahrungsaufnahme)

Jedes Labor sollte die Übertragbarkeit der Referenzbereiche für die eigenen Patientengruppen überprüfen und gegebenenfalls eigene Referenzbereiche ermitteln. Für diagnostische Zwecke sind die Calciumergebnisse stets im Zusammenhang mit der Anamnese, der klinischen Untersuchung und anderen Untersuchungsergebnissen zu werten.

### Sensitivität (analytische Nachweisgrenze):

0,05 mmol/l bzw. 0,2 mg/dl

Die Nachweisgrenze entspricht der niedrigsten messbaren Calcium-Konzentration, die von Null unterschieden werden kann.

### Impräzision:

#### Serum

Die Reproduzierbarkeit wurde mit Kontrollen bestimmt und ergab folgende Ergebnisse:

Probe	Tag / Tag		
	MW mg/dl	SD mg/dl	VK %
Kontrollserum 1	8,17	0,13	1,59
Kontrollserum 2	14,88	0,32	2,15
Kontrollserum 3	29,77	0,58	1,95

Probe	In der Serie		
	MW mmol/l	SD mmol/l	VK %
Kontrollserum 1	2,21	0,033	1,49
Kontrollserum 2	2,66	0,035	1,32
Kontrollserum 3	3,89	0,031	0,80

### Methodenvergleich:

Bei einem Vergleich von Analyticon Fluitest® CA CPC (y) mit einem kommerziell erhältlichen Test (x) wurden folgende Ergebnisse erhalten:

$$y = 1,113 x - 0,278; \quad r = 0,990$$

### Qualitätskontrolle:

#### Humanes Kontrollserum:

Contronorm® Plus 5 x 5 ml #1205  
 20 x 5 ml #1220  
 Controptath® Plus 5 x 5 ml #1305  
 20 x 5 ml #1320

#### Urinkontrolle:

Urine Control Set 8 x 5 ml #1507

Die Kontrollintervalle und Kontrollgrenzen sind den individuellen Anforderungen jedes Labors und den länderspezifischen Richtlinien anzupassen. Die Ergebnisse müssen innerhalb der festgesetzten Bereiche liegen. Jedes Labor sollte Korrekturmaßnahmen für den Fall beschreiben, dass Werte außerhalb des Bereichs liegen.

### Kalibration:

Standardisierung: Die Calciummethode wurde an der Atomabsorptionsspektrometrie abgeglichen

S1: 0,9% NaCl

S2: Bio-Cal® 20 x 3 ml #1420

Bio-Cal® E 10 x 3 ml #1430

R4: Kalibrator enthalten in Packung

### Roche/Hitachi:

Die Absorption von CO<sub>2</sub> in die geöffnete Reagenzflasche R1 führt zu verringerter Kalibrationsstabilität. Für die Bestimmung werden farbcodierte Chimneys benötigt, um die CO<sub>2</sub>-Aufnahme zu vermindern. Die Chimneys werden direkt in die entsprechenden Reagenzflaschen eingesetzt: weiß für R1. Sie können mehrfach für Reagenzflaschen aus der gleichen Packung verwendet werden. Chimneys werden an allen Geräten außer am Roche/Hitachi 736, 737 und 747 benötigt. Die Kalibrationsstabilität kann an diesen Geräten durch Verwendung eines geeigneten Flaschenverschlusses oder CO<sub>2</sub>-Absorbers beim Reagenz R1 erreicht werden.

### Kalibrationshäufigkeit:

Eine Zweipunktkalibration wird empfohlen

- Alle 7 Tage, wenn die Reagenzflaschen länger als 7 Tage im Gerät stehen.
  - Bei Reagenzflaschenwechsel, wenn die vorhergehenden Reagenzflaschen länger als 7 Tage im Gerät standen.
  - Bei Reagenzchargenwechsel
  - Wenn Qualitätskontrollverfahren dies erfordern
- Kalibrationsverifikation: nicht erforderlich

### Entsorgung:

Bitte beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften

### Literatur:

- Farrel E.C. Calcium. In: Pesce A.J., Kaplan L.A. (Hrsg.). Methods in Clinical Chemistry. St. Louis/Washington/Toronto: CV Mosby, 1987:865-869.
- Gindler E.M., King J.D. Am J Clin Pathol 1972;58:376.
- Glick M.R., Ryder K.W., Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32:470-474.
- Gosling P. Analytical reviews in clinical biochemistry: Calcium measurement. Ann Clin Biochem 1986;23:146.
- Guder W.G. Narayanan S., Wisser H., Zawta B. List of Analytes Preanalytical Variables. Broschüre in: Samples: From the Patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag, 1996.
- Külpmann W.R., Stummvoll H.K., Lehmann P. (Hrsg.). Elektrolyte, Klinik und Labor, 2. Auflage. Wien/New York: Springer-Verlag, 1997.
- Mathias D. Labordiagnostik bei Störungen des Knochenstoffwechsels. Clin Lab 1996;42:1069-1073.
- Schmidt-Gayk H., Blind E., Roth H.J. (Hrsg.). Calcium Regulating Hormones and Markers of Bone Metabolism: Measurement and Interpretation, 2. Auflage. Heidelberg: Clin Lab Publications, 1997.
- Tietz N.W., (Hrsg.). Clinical Guide to Laboratory Tests, 3. Auflage. Philadelphia, Pa: WB Saunders Company, 1995:102.
- Tietz N.W., (Hrsg.). Fundamentals of Clinical Chemistry, 3. Auflage. Philadelphia, Pa: WB Saunders Company, 1987:718-719.