

Urilyzer Cell Cuvettes

REF

ULC001

Instrukcije za uporabu

Namjenska uporaba:

Urilyzer Cell Cuvettes su jednokratno uporabive polikarbonatne posude za uzorke korištene pri analizi necentrifugiranih, humanih urinskih uzoraka s Urilyzer Cell analizatorom uzoraka. Namijenjene za profesionalnu, laboratorijsku uporabu. Namijenjene za in vitro dijagnostičku uporabu.

Načela testa:

Urilyzer Cell Cuvettes su posude za uzorke što omogućuju mikroskopsku analizu urinskih uzoraka.


Uključeni materijali:

600 kiveta u 12 držača kiveta s po 50 kiveta u svakom

Neuključeni materijali:

- Urilyzer Cell urinskih nalizatorom uzoraka
- Generalna laboratorijska oprema

Način uporabe kiveta:

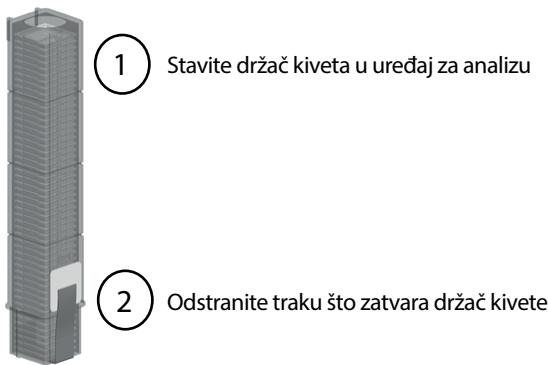

Uvjeti okruženja

Temperatura skladištenja	0 – 45°C
Transportna temperatura	-25°C – 60°C
Transportna vlaga zraka	20 – 80 %
Radne temperatura	5°C – 40°C
Radne vlaga zraka	20 – 80 %

Upozorenja i mjere opreza

- Ne izlagajte kivete izravnomu utjecaju suncat
- Ne skidajte traku za zatvaranje s držača kiveta prije stavljanja u analizacijski uređaj
- Ne vadite djelimično pune držače kiveta iz analizacijskog uređaja
- Svaka kiveta je za jednokratnu uporabu, nikada ne radite test s prije već korištenom kivetom
- Pošto je urin tekućina ljudskog podrijetla, ona može biti infektivna i značiti potencijalni biološki rizik
- Korištenim Urilyzer Cell Cuvettes i urinskim kontaminatima rukujte oprezno
- Odlaganje otpada prema primjenjivanim laboratorijskim propisima i instrukcijama.
- Kivete koristite prije silaska uporabnog roka

Pročitajte instrukcije korištenja svoga analizacijskog uređaja radi detalja o uzimanju uzoraka, propisanim koracima preparacije, vrednovanja rezultata, analitičkih i izvršnih karakteristika, interferencija, limitacija, procedura provjere kvalitete, specifičnih upozorenja i mjera opreza.

Dojava incidenata

Javite svaki teži incident što se dogodio pri korištenju ovoga proizvoda vašem Analyticon Biotechnologies servisnom zastupniku te vašoj lokalnoj nadležnoj službi.

Simboli:

- UDI** Jedinstvena identifikacija uređaja
- IVD** In vitro dijagnostički medicinski uređaj
- REF** Kataloški broj
- LOT** Lot broj
- CE** CE oznaka znači da je proizvod sukladan direktivama Europske unije
- Uporaba s** Uporaba s
- Granične vrijednosti temperature Limitacije** Granične vrijednosti temperature Limitacije
- Proizvođač** Proizvođač
- Ne izlagati izravnom utjecaju sunca** Ne izlagati izravnom utjecaju sunca
- Konzultirajte se o instrukcijama korištenja** Konzultirajte se o instrukcijama korištenja
- Granične vrijednosti vlažnosti zraka** Granične vrijednosti vlažnosti zraka
- Upozorenja** Upozorenja
- Biološki rizici** Biološki rizici
- 600** Sadrži količinu dovoljnu za 600 testova
- NE koristite višekratno** NE koristite višekratno
- Ne koristite ako je pakiranje oštećeno** Ne koristite ako je pakiranje oštećeno
- HR** Hrvatski jezik
- CH** Broj grupe
- Distributeri** Distributeri

Vremenski tijek verzije

Verzija	Datum	Promjene
1	24.01.2023	Prvo izdanje

CE

Proizvođač:

77 Elektronika Kft.
98. Fehérvári út, 1116 Budapest
HUNGARY
www.en.e77.hu
sales@e77.hu
Tel: + 36 1 206 - 1480
Fax: + 36 1 206 - 1481

Distributeri:

Analyticon Biotechnologies GmbH
Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels, Germany
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com