


El uroanálisis en el
es mas rápido




- Analizador de orina semi automatizado
- Sistema de carga continúa
- La primera opción para laboratorios de pequeño a mediano tamaño
- Procesamiento de 500 pruebas por hora
- Analizador extremadamente estable y fuerte.

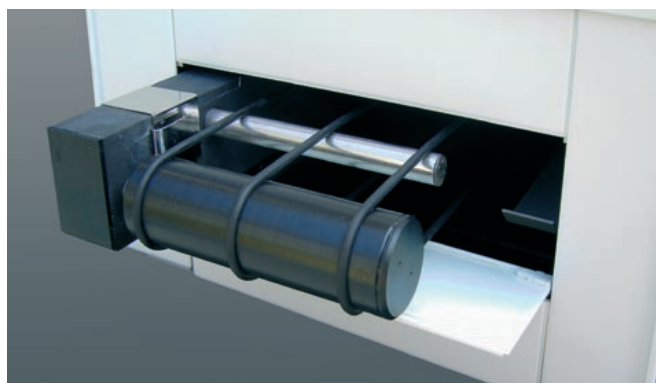

Brazo de transportación en posición de ingreso, el porta tiras sale del analizador completamente para ser limpiado.



Cajón de desechos para eliminación higiénica de las tiras usadas.

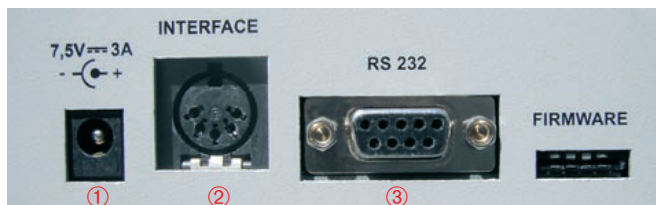

Conexiones en la parte trasera del equipo Combi Scan® 500:
① = 7.5 V conexión de red eléctrica, ② = Din 5, ③ = RS 232

Características y funciones:

- Reconocimiento automático y espera de tiras reactivas
- Entrada de datos vía teclado o lector de código de barras
- Selección variable del formato a imprimir los resultados de las pruebas así como fecha /datos
- Rangos ajustables para concentración, grados y unidades
- Transporte y medición automático de las tiras

Datos técnicos:

- Tipo: Sensor de imágenes de Color CCD
- Procesamiento: 500 tiras/hora
- Pantalla Cristal Liquido de 4 líneas x 24 caracteres
- Idiomas: Ingles, Alemán, Francés, Húngaro, Español
- Opciones de impresión
- Idiomas: Chino, Ingles, Alemán, Español, Francés, Húngaro.
- Unidades: SI, Convencional, Arbitrario.
- Impresora integrada de bajo ruido que utiliza papel térmico de 57 mm de ancho y 50 mm de diámetro.
- Almacena: los últimos 999 resultados
- Interfases: RS 232, Din 5
- Dimensiones: 480 x 290 x 165 mm
- Adaptador de corriente externa: 7,5 V DC/3A

Opcional:

- Teclado
- Lector de código de barras

(Todas las modificaciones a la vista de los avances técnicos están reservadas)



Analizador de tiras de orina
Combi Scan® 500

Art.-#
A93005

Tiras de prueba para orina
Combi-Screen® 11SYS
Combi-Screen® 11SYS PLUS

Presentación del tubo **Art.-#**
100 tiras 93100
100 tiras 94100

Parámetros:

Bilirrubina, Urobilinogeno, Cetonas, Acido Ascórbico, Glucosa, Proteínas, Sangre, pH, Nitritos, Leucocitos, Gravedad Especifica.

Combi-Screen® y Combi Scan® son marcas registradas de Analyticon Biotechnologies AG.

Información del distribuidor

Analyticon
Biotechnologies AG

Am Mühlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany

Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-71

info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com