

Urianálisis – de forma rápida



- Analizador de orina semi automatizado
- Sistema de carga continua
- La primera opción para laboratorios de pequeño a mediano tamaño
- Procesamiento de hasta 500 pruebas/hora
- Analizador extremadamente estable y sólido

Características y funciones


- Reconocimiento automático y espera de tiras reactivas
- Entrada de datos vía teclado o lector de código de barras
- Selección variable del formato a imprimir los resultados de las pruebas así como fecha /datos
- Rangos ajustables para concentración, grados y unidades
- Transporte y medición automático de las tiras



La carga continua de tiras permite rendimiento de hasta 500 pruebas/hora.



Contenedor para eliminación higiénica de las tiras usadas.

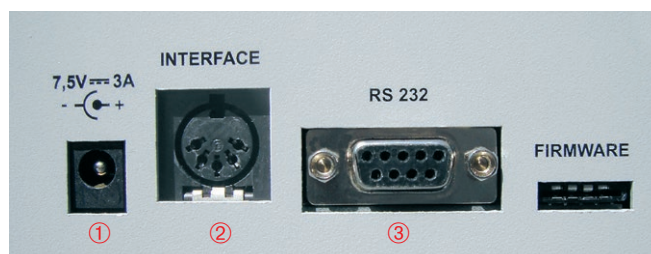

Conexiones en la parte trasera del equipo CombiScan® 500: ① = 7.5 V conexión de red eléctrica, ② = Din 5, ③ = RS 232

Datos técnicos

Typo:	Sensor de imágenes de Color CCD
Procesamiento:	500 tiras/hora
Pantalla:	LCD de 4 líneas x 24 caracteres, Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Húngaro, Español
Opciones de impresión:	Idiomas: Chino, Inglés, Alemán, Español, Francés, Húngaro. Unidades: SI, Convencional, Arbitrario
Impresora:	Integrada de bajo ruido que utiliza papel térmico de 57 mm de ancho y 50 mm de diámetro
Almacena:	Los últimos 999 resultados
Dimensiones:	480 x 290 x 165 mm
Interfases:	RS 232, Din 5, adaptador de corriente externa: 7,5 V DC/3A
Optionals:	Teclado, lector de código de barras

Consumibles



Analizador de tiras de orina
CombiScan® 500

Tiras reactivas de orina
CombiScreen® 11SYS PLUS
CombiScreen® 11SYS

Control
CombiScreen® Control PN

Contenido
100/150 tiras
100/150 tiras

Contenido
2 x 15 ml

Art.-#
A93005

Art.-#
94100/94150
93100/93150

Art.-#
93001



Analyticon Biotechnologies AG

Am Muehlenberg 10 · 35104 Lichtenfels - Germany · Phone: +49 6454 7991-0
www.analyticon-diagnostics.com · info@analyticon-diagnostics.com

